


Mepitel® Film

APÓSITO PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL

- Mepitel® Film es un film transparente y transpirable que protege la piel. Puede utilizarse solo o en combinación con otros productos.
- Mepitel® Film minimiza el traumatismo y el dolor en los cambios de apósito.^{1,2,3,4,5,6}
- Dispone de un sencillo y cómodo sistema de aplicación.

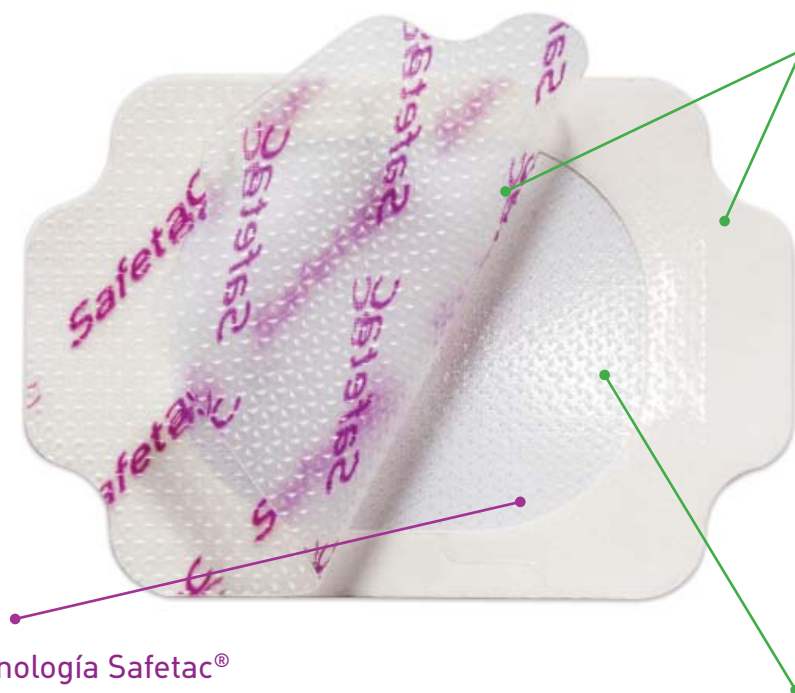

Film protector y borde de papel

- Para una fácil aplicación.

Safetac®
TECHNOLOGY

Capa con Tecnología Safetac®

- Minimiza el dolor y el traumatismo antes, durante y después de la retirada del apósito.^{1,2,3,5,6}
- Se adhiere a la piel seca, no al lecho húmedo de la herida.²
- Sella los márgenes de la herida y minimiza el riesgo de maceración.^{3,4}

Film posterior de poliuretano

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos.
- Barrera efectiva contra virus y bacterias*.


*Microbios mayores de 25 nm

Tecnología Safetac®

Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva y patentada. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.molnlycke.es

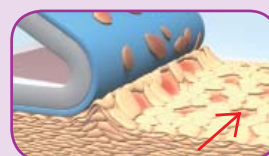

Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales



Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac

Modo de utilización Mepitel® Film



Secar cuidadosamente la piel donde se aplique el apósito. Retirar el papel protector (impreso con el logotipo Safetac) dejando la parte adhesiva al descubierto.



Colocar el apósito. Mepitel Film puede ser recolocado siempre que el marco de papel esté intacto. Retirar el marco de papel blanco. No estirar el apósito.

Para una fijación segura, Mepitel Film debe cubrir al menos 1-2 cm de piel perilesional para medidas hasta 10x12 cm; y 5 cm para medidas más grandes.



Colocar el apósito en la zona afectada. Mepitel Film puede retirarse sin causar desprendimiento epidérmico ni dolor.

Cómo funciona Mepitel® Film

Mepitel® Film crea una barrera flexible y transparente que protege la piel o la herida frente a microbios y bacterias. Se adapta a los contornos del cuerpo impidiendo el paso de líquidos y de la contaminación exterior. Crea un ambiente óptimo controlando el nivel de humedad. Proporciona una adhesión instantánea. No deja residuos y el nivel de adhesión no aumenta con el paso del tiempo.

Frecuencia de cambio

Mepitel® Film puede dejarse varios días en la herida, dependiendo de las condiciones de la piel o herida, o de las indicadas por las prácticas clínicas aceptadas.

Beneficios de Mepitel® Film

- Minimiza el dolor y el traumatismo en los cambios de apósito.
- Evita el riesgo de dañar el tejido neoformado.
- Transparente para una fácil aplicación.
- Se adapta al contorno del cuerpo, proporcionando el mayor confort para el paciente.
- Barrera protectora frente a virus y bacterias (microbios > de 25 nm).
- Hipoalergénico.
- No deja residuos.
- Impermeable a líquidos.
- Resistente al agua.

Indicaciones

Mepitel® Film está indicado para un amplio rango de heridas superficiales, tales como úlceras por presión estadio I y II, lesiones y quemaduras. Protege la piel sensible y frágil. Puede usarse como protector para heridas quirúrgicas, por ejemplo abdomen; o como apósito secundario para fijar apósitos primarios. Los esparadrapos y dispositivos se pueden fijar encima de Mepitel® Film. Protege la piel en la zona de fijación del esparadrappo.

Precauciones

- Mepitel® Film no permite el paso de exudado a través de él a un apósito secundario.
- Si al utilizar más de un apósito, estos se superponen, disminuye la capacidad de permeabilidad, lo que puede producir que el exceso de exudado no pase a través del apósito.

Advertencias

Mepitel® Film no debe utilizarse como fijación para catéteres intravenosos ni está recomendado en la fijación de sistemas de soporte vital.



Presentaciones MEPITEL® FILM (estéril)

Nº Ref.	Tamaño (cm)	Unids./ Env.	Unids./ TRP.
296170	6 x 7	10	50
296270	10 x 12	10	70
296470	10 x 25	10	50
296670	15 x 20	10	70