



## Vendaje tubular ligero

El nuevo Tubifast 2-Way Stretch es el primer y único vendaje tubular ligero del mundo, con elasticidad<sup>1</sup> radial y longitudinal. Esta característica, **exclusiva**, proporciona a los pacientes una completa libertad de movimientos y un confort añadido. Ideal para la sujeción de apósitos y protección de la piel, en cualquier parte del cuerpo. También puede usarse como protector de articulaciones y debajo de una escayola. Tubifast 2-Way Stretch fija los apósitos en el lugar, de forma segura sin necesidad de una fijación adicional. Es rápido y fácil de usar, con menor riesgo de deshilachado<sup>2</sup> que los vendajes tubulares tradicionales.

Tubifast 2-Way Stretch fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión

Presentación tubular: no requiere fijación adicional

Rápido y fácil de usar: cortar el tamaño y extender sobre el apósito


Rápido y fácil de usar significa una reducción del riesgo de contaminación cruzada

Menor deshilachado, para un menor riesgo de fibras en la herida<sup>2</sup>

La variedad de medidas disponibles asegura un coste efectivo minimizando el gasto

Disponible en 5 colores con diferentes anchuras, Tubifast 2-Way Stretch ha sido diseñado para adaptarse cómodamente a las extremidades sin importar la forma o talla

La elasticidad radial y longitudinal de Tubifast 2-Way Stretch permite al paciente una completa libertad de movimientos y un confort añadido<sup>1</sup>

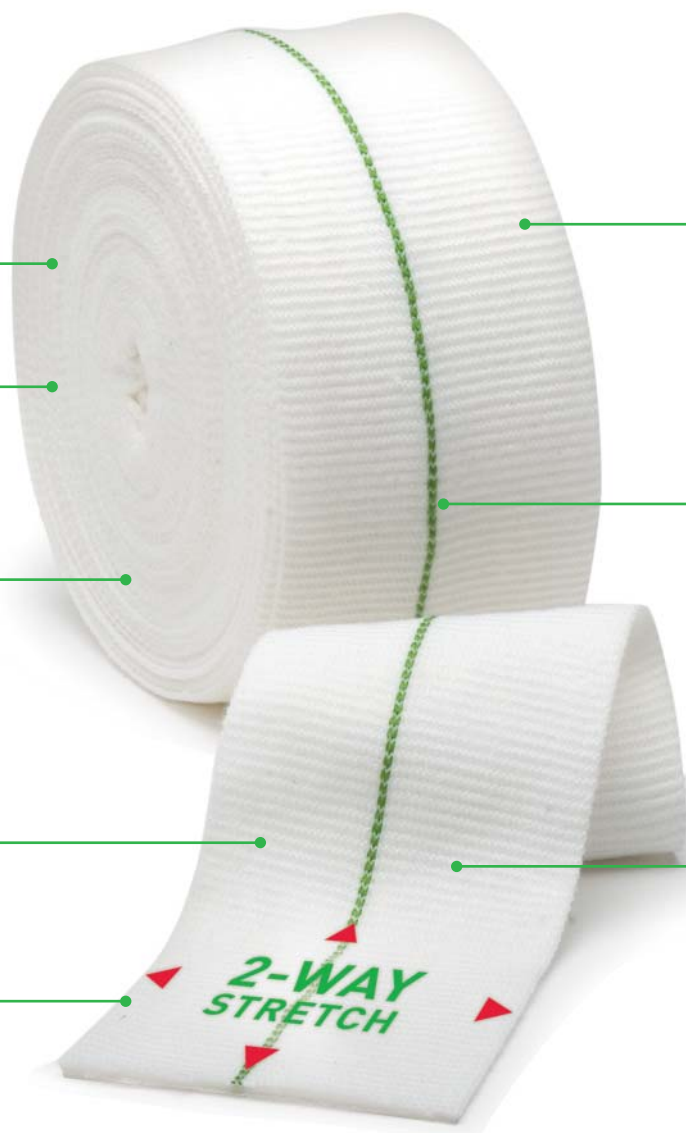

## Cómo funciona Tubifast 2-Way Stretch

El nuevo Tubifast 2-Way Stretch es fabricado con viscosa y con hilos muy finos de elastano tejidos radial y longitudinalmente, para proporcionar una excelente elasticidad.

Tubifast 2-Way Stretch fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión. No es necesaria una fijación adicional. Las **dos direcciones de elongación** permiten a los pacientes una completa libertad de movimientos y un confort añadido. Tubifast 2-Way Stretch está disponible en un amplio rango de anchuras y ha sido diseñado para adaptarse cómodamente a las extremidades sin importar la forma o talla.


Cada talla se identifica por una línea de color tejida en el vendaje. Es rápido y fácil de usar: cortar el tamaño y extender sobre el apósito.

## Indicaciones


Tubifast 2-Way Stretch está indicado para:

- Sujeción de apósitos y la protección de la piel.
- Protección de articulaciones y debajo de escayola.
- Fijación de apósitos en áreas de difícil accesibilidad como muñones en pacientes amputados.


## Forma de utilización de Tubifast 2-Way Stretch

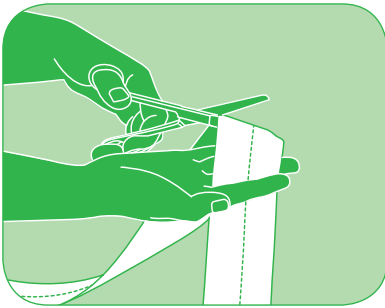

1. Elige la anchura correcta usando la referencia de color, y corta la longitud adecuada

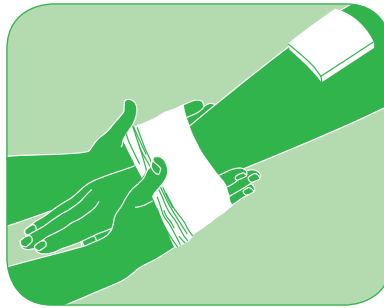

2. Extiende Tubifast 2-Way Stretch sobre el área afectada

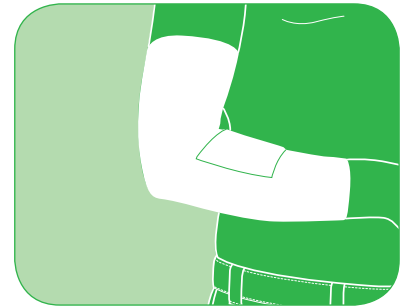

3. Coloca Tubifast 2-Way Stretch cubriendo el apósito. Las instrucciones están ilustradas paso a paso para las aplicaciones más avanzadas

## Beneficios de Tubifast 2-Way Stretch

- Tubifast 2-Way Stretch fija los apósitos de forma segura, sin constricción ni compresión.
- Su **elasticidad radial y longitudinal** proporciona a los pacientes una completa libertad de movimientos y un confort añadido.<sup>1</sup>
- Está disponible en una gran variedad de medidas asegurando un coste efectivo por reducción de gastos.
- Rápido y fácil de usar: corta la medida y extiéndelo sobre el apósito.
- Disponible en un rango de referencias codificadas por color dependiendo de la talla, para adaptarse tanto a miembros pequeños, como a troncos de adulto.
- Menor deshilachado para un menor riesgo de fibras en la herida.<sup>2</sup>

Medidas Tubifast 2-Way Stretch

Color e Indicaciones	Anchura x Largura	Miembro	Nº Ref.	Uds. TRP
Línea ROJA Miembros pequeños	3,5 cm. x 1 m.	8-15 cm.	2480	144
	3,5 cm. x 10 m.	8-15 cm.	2434	48
Línea VERDE Miembros pequeños y medianos	5 cm. x 1 m.	10-25 cm.	2481	144
	5 cm. x 10 m.	10-25 cm.	2436	42
Línea AZUL Miembros grandes	7,5 cm. x 1 m.	20-45 cm.	2482	96
	7,5 cm. x 10 m.	20-45 cm.	2438	30
Línea AMARILLA Miembros muy grandes, cabezas, tronco de niño	10,75 cm. x 1 m.	35-65 cm.	2483	96
	10,75 cm. x 10 m.	35-65 cm.	2440	18
Línea PÚRPURA Tronco de adulto	20 cm. x 1 m.	60-130 cm.	2479	72
	20 cm. x 10 m.	60-130 cm.	2444	20

## Composición del tejido

Viscosa, elastano y poliamida

## Instrucciones de lavado



Tubifast 2-Way Stretch se presenta en envases individuales

El látex de caucho natural no es un componente de Tubifast 2-Way Stretch o de su embalaje

<sup>1</sup> Los datos publicados muestran que Tubifast 2-Way Stretch excede los requerimientos mínimos de elasticidad longitudinal para las acciones de sentarse, agacharse y flexionarse. Physical testing of textiles, B. P. Saville, Woodhead Publishing, 1999.

<sup>2</sup> Data on file.